

Oxivir Excel Wipe CE

Dezinfekcijske krpice za površine

Opis

Oxivir Excel je čistilo in dezinfekcija v enem. Nudi najboljšo alternativo običajnim dezinfekcijskim sredstvom, saj zagotavlja virucidno učinkovitost v le 30 sekundah, hkrati pa je zelo nežen do površin in predstavlja najmanjše tveganje za vaše osebe in stranke. Aktivna sestavina, vodikov peroksid, razpade v vodo in kisik le nekaj minut po uporabi in ne pušča ostankov, ki bi lahko spremenili videz površine ali bili škodljivi.

Ključne lastnosti

- Popolno virucidno delovanje v le 30 sekundah.
- Hitro uničevanje širokega spektra virusov, bakterij in kvasovk.
- Vrhunsko čiščenje z visoko zmogljivim površinsko aktivnim sistemom.
- Brez dišav.
- Izpiranje ni potrebno.
- Varnejši za okolje in uporabnike, saj se aktivne snovi razgradijo na vodo in kisik.



Prednosti

- Široka učinkovitost zagotavlja najvišjo stopnjo dezinfekcije. Obširno testirano v skladu z evropskimi normami in kaže učinkovitost proti številnim patogenom. Je popoln virucid, deluje v 30 sekundah na vse viruse, vključno s polio, adeno in murine norovirusom. Učinkuje proti vsem virusom z ovojnicjo, kot so: HIV, HBV, HCV, gripa, virus vakcinije in koronavirus.
- Varno za uporabnike, osebna zaščitna oprema ni potrebna. Brez oznak za nevarnosti.
- Vrhunska učinkovitost čiščenja in 10-krat hitrejše od vašega običajnega razkužila.
- Formulacija je nežna do površin in podaljšuje življenjsko dobo opreme. Ne pušča ostankov.
- Primerno za uporabo na območjih z visokim tveganjem; maloprodaja, izbraževanju, zdravstvu in drugih sektorjih.
- Izboljšajte skladnost z dezinfekcijo za 35 %.

Ni namenjen za uporabo na invazivnih medicinskih napravah.

Navodila za uporabo

1. Odstranite umazanijo.
2. Odprite embalažo, vzemite posamezno krpico in zaprite pokrov.
3. Obrišite površino, zagotovite, da je celotna površina navlažena in pustite, da se posuši na zraku.
4. Poskrbite, da površina ostane mokra ves čas stika.
5. Zamenjajte krpico, ko površine ne zmoči več, ko je vidno umazana ali ko menjate območje čiščenja.

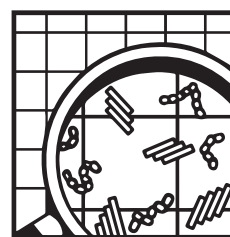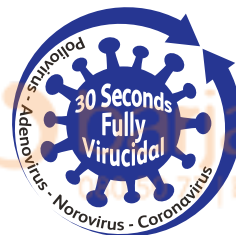

Oxivir Excel Wipe CE

Tehnični podatki

Izgled: PP krpica

Vonj: Nevtralen

pH vrednost (delovna raztopina): 1,95

Relativna gostota (20°C): 1,000

Rok uporabe: 720 dni

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu.

Samo za profesionalne uporabnike. Shranjujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur.

Reagira z oksidirajočimi snovmi.

Kompatibilnost izdelka

Pomembno: Ne mešajte z drugimi izdelki. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na vodo ali kislino. Pod priporočenimi pogoji uporabe je izdelek primeren za uporabo na večini materialov; nerjaveče jeklo, krom, vinil, najlonske tkanine, laminirane površine, steklo, gumo, trda in fleksibilna plastika (polipropilen, poliuretan, polietilen, PVC akril itd.).

Mikrobiološki podatki

Površinsko aktivne snovi, uporabljene v tem izdelku, so biološko razgradljive v skladu z zahtevami EU Uredbe o detergentih EC 648/2004.

Razpoložljivo pakiranje

Oxivir Excel Wipe CE je na voljo v različnih pakiranjih:

Softpack (12x30 kos, 12x100kos in 24x100 kos)

Kanister (6x100 kos in 6x160 kos)

AHP® in Design ter Oxivir® so blagovne znamke družbe Diversey, Inc.

Oxivir Excel Wipe CE

		Umazani pogoji
	EN test	Kontaktni čas
Baktericidno	EN 1276*	1 minuta
	EN 13727	30 sekund
	EN 16615	1 minuta
Kvasovke	EN1650*	5 minut
	EN13624	5 minut
	EN 16615	1 minuta
Virucidno	EN 14476	30 sekund
	(Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus)	
* Testi, opravljeni v umazanih pogojih za nezdravstvena območja.		